

Свяжитесь с представителями нашей дилерской сети
во всех регионах России или обратитесь
в наши офисы в Санкт-Петербурге и в Москве.



ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ серии "МК" (металло-каркасная)

Квалифицированные
и опытные сотрудники
проконсультируют Вас
и помогут:

- составить оптимально
спецификацию;
- спроектировать
расстановку мебели
по помещениям.



ПОСЕТИТЕ НАШИ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Санкт-Петербург: ул. Ольминского, д. 14,
тел./факс (812) 622-17-66 (многоканальный)
www.lamo-spb.ru lamo-spb@mail.ru info@lamo-spb.ru

Москва: ул. Луганская, д. 5,
тел.: +7-499-218-43-91, +7-977-688-60-68, +7-977-618-67-31
lamo-mos@bk.ru

Лабораторная мебель серии "МК" – это мебель классического дизайна из влагостойкого финского меламина Ruhos на металлическом каркасе. Мебель этой серии – лучшее решение для лабораторий, где нет жесткого использования агрессивных сред (микробиология, медицина, пищевая, легкая промышленность, защита окружающей среды и т.п.). В этих областях мебель серии "МК" зарекомендовала себя как удобная и надежная.



Бокс меламиновый вытяжной (вытяжной шкаф)

Может использоваться только в тех лабораториях, где отсутствуют агрессивные вещества – медицинских, экологических и т.д. При более серьезных нагрузках и задачах настоятельно рекомендуем использовать цельнометаллические шкафы серий ШВ, ШВУ, ШВМ и ШВМД. Комплектация: вертикальный экран на противовесах из акрилового стекла, фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе, вытяжка тяжелых газов со столешницы и легких газов в верхней части вытяжной камеры, тумба с вытяжкой в основании шкафа имеет большой объем и съемную полку, пылевлагозащищенный люминесцентный светильник мощностью 40 Вт, выключатель, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, сливная раковина из полипропилена, слив, химическистойкий кран для воды итальянской фирмы TOF, гибкая подводка для воды.



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 БМВ _{кв}	керамика KS-12	935x790x x2100
900 БМВ _{wb}	Wilsonart	
1200 БМВ _{wb}	Wilsonart	1235x790x2100
1200 БМВ _{кв}	керамика KS-12	
1500 БМВ _{wb}	Wilsonart	1535x790x2100
1500 БМВ _{кв}	керамика KS-12	
1800 БМВ _{wb}	Wilsonart	1835x790x2100
1800 БМВ _{кв}	керамика KS-12	



1200 БМВ_{кв}

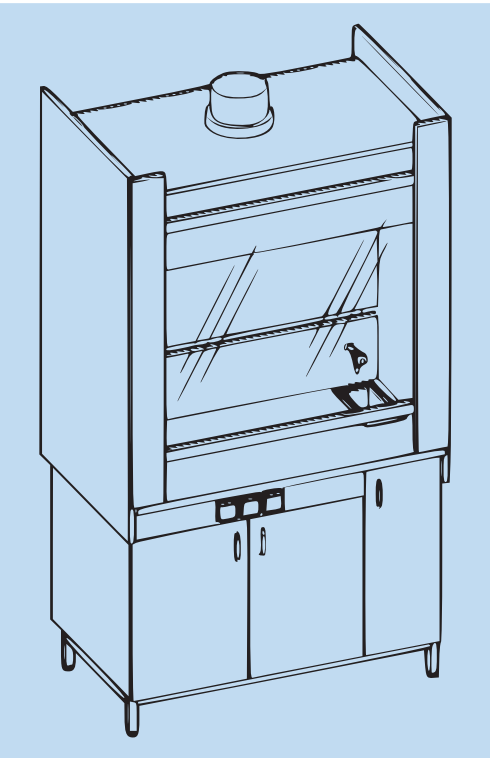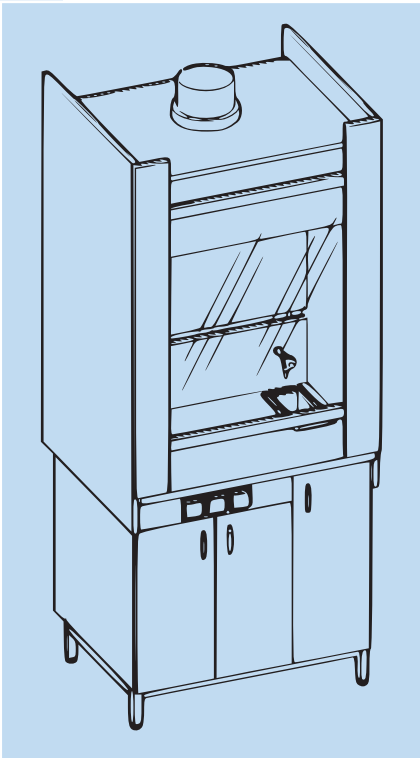

Серия МК (металло-каркасная)

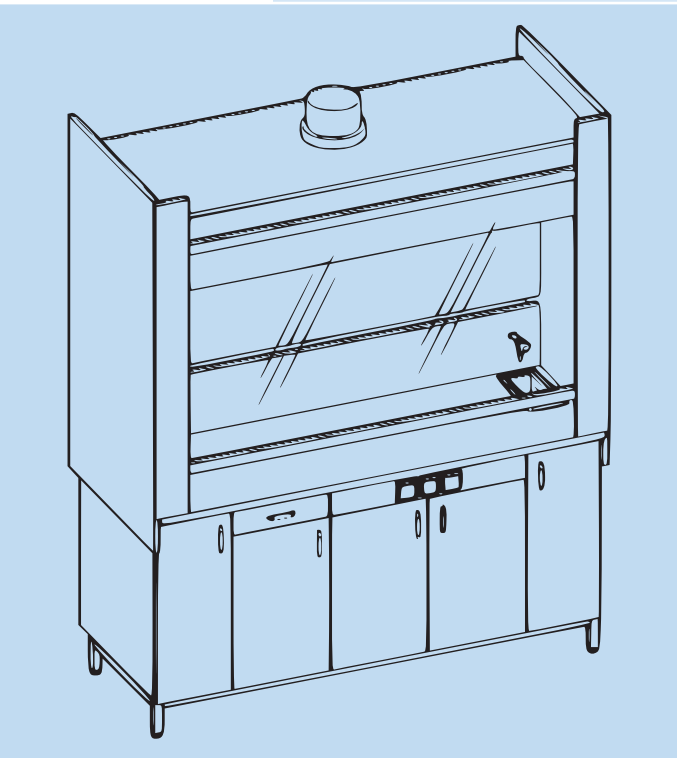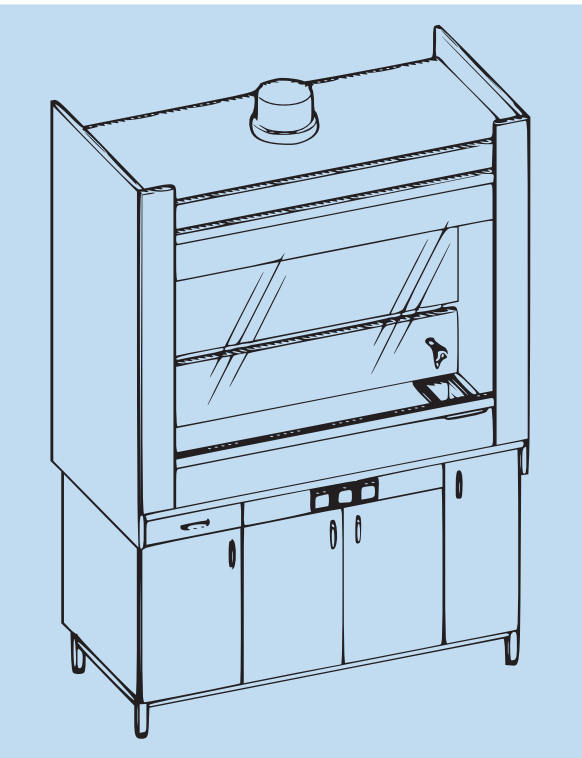

Серия МК (металло-каркасная)

Столы лабораторные

Столы лабораторные низкие (для работы сидя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛНл	ламинат	1200x600x750
1200 СЛНп	пластик	
1200 СЛНн	нерж./сталь	
1200 СЛНк	керамика KS-12	
1200 СЛНw	Wilsonart	
1500 СЛНл	ламинат	1500x600x750
1500 СЛНп	пластик	
1500 СЛНк	керамика KS-12	
1500 СЛНw	Wilsonart	

Столы лабораторные высокие (для работы стоя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл	ламинат	1200x600x900
1200 СЛВп	пластик	
1200 СЛВн	нерж./сталь	
1200 СЛВк	керамика KS-12	
1200 СЛВw	Wilsonart	
1500 СЛВл	ламинат	1500x600x900
1500 СЛВп	пластик	
1500 СЛВк	керамика KS-12	
1500 СЛВw	Wilsonart	

Столы лабораторные на опорных тумбах

Стол лабораторный одностумбовый, тумба с дверкой

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл-ТД	ламинат	1200x600x900
1200 СЛВп-ТД	пластик	
1200 СЛВн-ТД	нерж./сталь	
1200 СЛВк-ТД	керамика KS-12	
1200 СЛВw-ТД	Wilsonart	
1500 СЛВл-ТД	ламинат	1500x600x900
1500 СЛВп-ТД	пластик	
1500 СЛВк-ТД	керамика KS-12	
1500 СЛВw-ТД	Wilsonart	

Стол лабораторный одностумбовый, тумба с ящиками


1200 СЛВл-ТЯ	ламинат	1200x600x900
1200 СЛВп-ТЯ	пластик	
1200 СЛВн-ТЯ	нерж./сталь	
1200 СЛВк-ТЯ	керамика KS-12	
1200 СЛВw-ТЯ	Wilsonart	
1500 СЛВл-ТЯ	ламинат	1500x600x900
1500 СЛВп-ТЯ	пластик	
1500 СЛВк-ТЯ	керамика KS-12	
1500 СЛВw-ТЯ	Wilsonart	

Стол лабораторный двухстумбовый, тумба с ящиками и тумба с дверкой


1500 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1500x600x900
1500 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1500 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1800x600x900
1800 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1800 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	



Стол лабораторный
1500 СЛВw

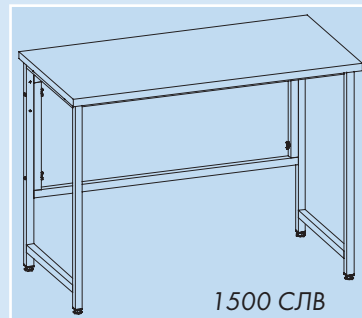

1500 СЛВ

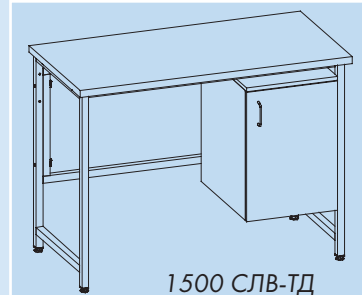

1500 СЛВ-ТД



Стол лабораторный
1500 СЛВw-ТЯ



1500 СЛВ-ТЯ-ТД

Столы-тумбы лабораторные

Предназначены для более полного использования пространства лаборатории. Обладают обширной зоной хранения под столешницей.

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (LxHxD)
1200 СТЛл	ламинат	4 выдвижных ящика и 2 дверки с полкой	1200x600x900
1200 СТЛп	пластик		
1200 СТЛн	нерж./сталь		
1200 СТЛк	керамика KS-12		
1200 СТЛw	Wilsonart		
1500 СТЛл	ламинат	4 выдвижных ящика и 3 дверки с полкой	1500x600x900
1500 СТЛп	пластик		
1500 СТЛк	керамика KS-12		
1500 СТЛw	Wilsonart		
1800 СТЛл	ламинат	8 выдвижных ящиков и 2 дверки с полкой	1800x600x900
1800 СТЛп	пластик		
1800 СТЛк	керамика KS-12		
1800 СТЛw	Wilsonart		

Столы лабораторные большие (глубина 900 мм)

На основе лабораторных столов

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1200/900 СЛВл	ламинат	1200x900x900
1200/900 СЛВп	пластик	
1200/900 СЛВк	керамика KS-12	
1200/900 СЛВw	Wilsonart	
1500/900 СЛВл	ламинат	1500x900x900
1500/900 СЛВп	пластик	
1500/900 СЛВк	керамика KS-12	
1500/900 СЛВw	Wilsonart	

На основе столов на опорных тумбах

1500/900 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1500x900x900
1500/900 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1500/900 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500/900 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800/900 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1800x900x900
1800/900 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1800/900 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800/900 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	

На основе столов-тумб

1200/900 СТЛл	ламинат	1200x900x900
1200/900 СТЛп	пластик	
1200/900 СТЛк	керамика KS-12	
1200/900 СТЛw	Wilsonart	1500x900x900
1500/900 СТЛл	ламинат	
1500/900 СТЛп	пластик	
1500/900 СТЛк	керамика KS-12	1800x900x900
1500/900 СТЛw	Wilsonart	
1800/900 СТЛл	ламинат	
1800/900 СТЛп	пластик	
1800/900 СТЛк	керамика KS-12	1800x900x900
1800/900 СТЛw	Wilsonart	

Надстолья-стеллажи пристенные для столов больших (глубиной 900 мм)

Модель	Комплектация	Размеры (LxHxD)
1200 НСП	светильник, выключатель, 2 розетки, полки	1200x300x600
1500 НСП		1500x300x600
1800 НСП	светильник, выключатель, 4 розетки, полки	1800x300x600



1800 СТЛ




Стол лабораторный
большой
1500/900 СЛВw



1500/900 СЛВ-ТЯ-ТД



1200/900 СТЛ

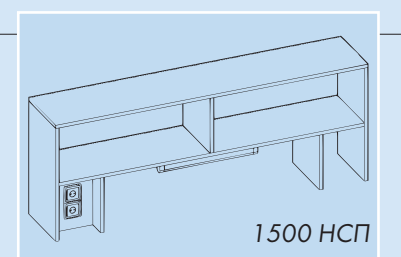


1500 НСП


Столы пристенные




1500 СПФ

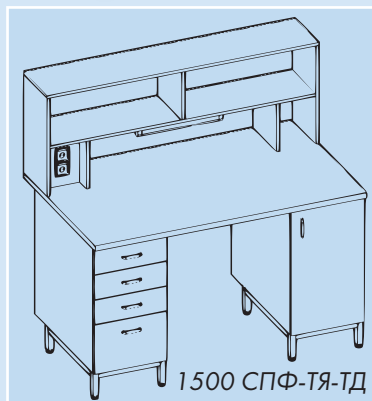

1500 СПФ-ТЯ-ТД

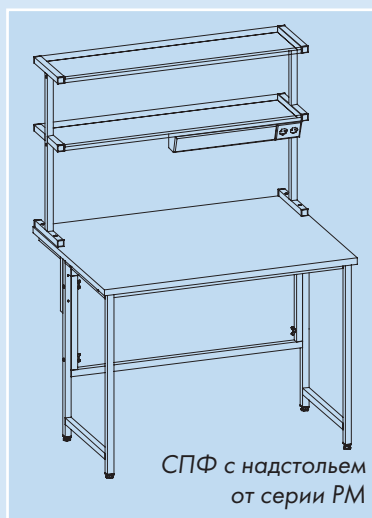

СПФ с надстольем
от серии РМ

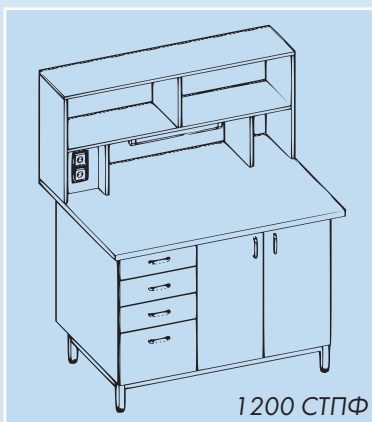

1200 СППФ

■ Столы пристенные физические

Комбинация стола лабораторного и надстоля пристенного.

Комплектация: люминесцентный светильник, выключатель, 2 электророзетки с заземлением, 2 полки.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПФл	ламинат	1200x900x1500
1200 СПФп	пластик	
1200 СПФк	керамика KS-12	
1200 СПФw	Wilsonart	
1500 СПФл	ламинат	1500x900x1500
1500 СПФп	пластик	
1500 СПФк	керамика KS-12	
1500 СПФw	Wilsonart	

Могут комплектоваться широким ассортиментом подкатных тумб и столов-тумб (см. стр. 14-15).

■ На основе столов на опорных тумбах


Комплектация: люминесцентный светильник с выключателем, 2 розетки с заземлением, 2 полки, тумба с дверкой и тумба с 4 ящиками.

1500 СПФл-ТЯ-ТД	ламинат	1500x900x1500
1500 СПФп-ТЯ-ТД	пластик	
1500 СПФк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500 СПФw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800 СПФл-ТЯ-ТД	ламинат	1800x900x1500
1800 СПФп-ТЯ-ТД	пластик	
1800 СПФк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800 СПФw-ТЯ-ТД	Wilsonart	


■ Столы-тумбы пристенные физические

Комбинация стола-тумбы большого и надстоля-стеллажа пристенного.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СППФл	ламинат	1200x900x1500
1200 СППФп	пластик	
1200 СППФк	керамика KS-12	
1200 СППФw	Wilsonart	
1500 СППФл	ламинат	1500x900x1500
1500 СППФп	пластик	
1500 СППФк	керамика KS-12	
1500 СППФw	Wilsonart	
1800 СППФл	ламинат	1800x900x1500
1800 СППФп	пластик	
1800 СППФк	керамика KS-12	
1800 СППФw	Wilsonart	

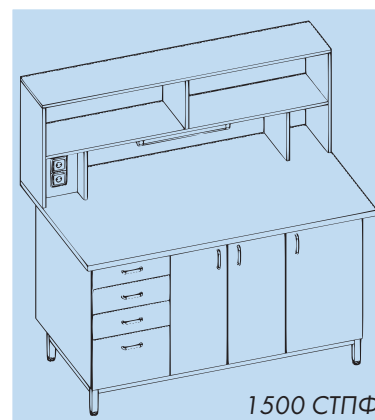

1500 СППФ

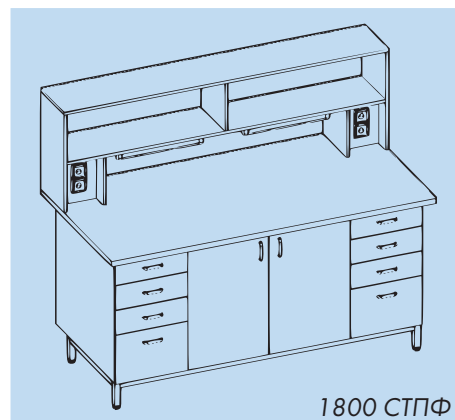

1800 СППФ

■ Столы пристенные химические (с водой, с надстольем-стеллажом)

Комбинация стола пристенного физического и комплекта химического стола пристенного (сливная раковина, слив, кран для воды)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПХп	пластик	1200x900x1500
1200 СПХк	керамика KS-12	
1200 СПХw	Wilsonart	
1200 СПХд	Durcon	
1200 СПХкм	Монолитная керамика	1500x900x1500
1500 СПХп	пластик	
1500 СПХк	керамика KS-12	
1500 СПХw	Wilsonart	
1500 СПХд	Durcon	
1500 СПХкм	Монолитная керамика	

Могут комплектоваться широким ассортиментом подкатных тумб и столов-тумб (см. стр. 14-15).

Столы пристенные могут комплектоваться надстольем-стеллажом металлическим от серии РМ (см.стр.64 и 66-67 большого каталога ЛаМО 2016).

Пример заказа: стол глубиной 900 мм 1500/900 СЛВw +
+ надстолье-стеллаж пристенные 1500НСП-У
+ комплект химического стола

■ На основе столов на опорных тумбах


Комбинация стола пристенного физического на опорных тумбах и комплекта химического стола (полипропиленовая сливная раковина, химстойкий кран для воды, слив)

1500 СПХп-ТЯ-ТД	пластик	1500x900x1500
1500 СПХк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500 СПХw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1500 СПХд-ТЯ-ТД	Durcon	
1500 СПХкм-ТЯ-ТД	Монолитная керамика	1800x900x1500
1800 СПХп-ТЯ-ТД	пластик	
1800 СПХк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800 СПХw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800 СПХд-ТЯ-ТД	Durcon	
1800 СПХкм-ТЯ-ТД	Монолитная керамика	

■ Столы-тумбы пристенные химические

Комбинация стола-тумбы пристенного физического и комплекта химического стола пристенного (сливная раковина, слив, кран для воды)


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СППХп	пластик	1200x900x1500
1200 СППХк	керамика KS-12	
1200 СППХw	Wilsonart	
1200 СППХд	Durcon	
1200 СППХкм	Монолитная керамика	1500x900x1500
1500 СППХп	пластик	
1500 СППХк	керамика KS-12	
1500 СППХw	Wilsonart	
1500 СППХд	Durcon	
1500 СППХкм	Монолитная керамика	

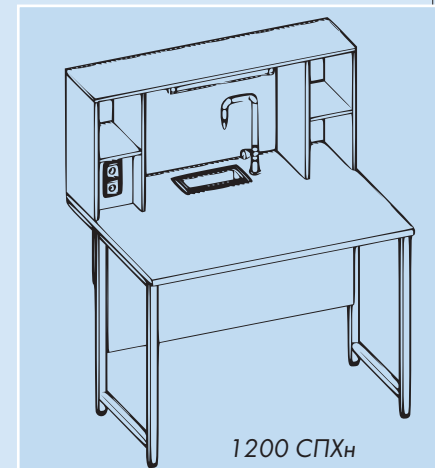


1200 СПХп



СПХ с надстольем
от серии РМ

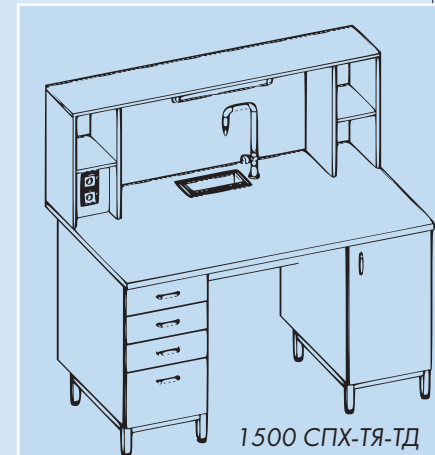

1500 СПХ-ТЯ-ТД

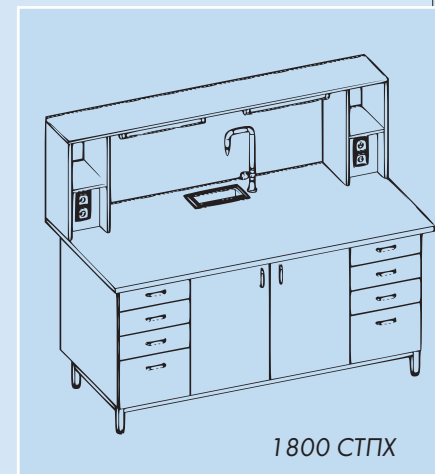

1800 СППХ

Столы островные

Столы островные физические

Островное надстолье (стеллаж) укомплектован 2 полками, 4 электророзетками, люминисцентным светильником с выключателем, для столов длиной 2400 и 3000 мм: 2 полками, 8 электророзетками, 2 люминисцентными светильниками с выключателями

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОФл	ламинат	1200x1500x1500
1200 СОФп	пластик	
1200 СОФк	керамика KS-12	
1200 СОФw	Wilsonart	
1500 СОФл	ламинат	1500x1500x1500
1500 СОФп	пластик	
1500 СОФк	керамика KS-12	
1500 СОФw	Wilsonart	
2400 СОФл	ламинат	2400x1500x1500
2400 СОФп	пластик	
2400 СОФк	керамика KS-12	
2400 СОФw	Wilsonart	
3000 СОФл	ламинат	3000x1500x1500
3000 СОФп	пластик	
3000 СОФк	керамика KS-12	
3000 СОФw	Wilsonart	

Могут комплектоваться широким ассортиментом подкатных тумб и столов-тумб (см. стр. 14-15).

На основе опорных тумб

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (LxHxD)
1500 СОФл-2ТЯ-2ТД	ламинат	2 тумбы с ящиками и 2 тумбы с дверкой, 4 розетки, 2 полки люминесц. светильник с выкл.	1500x x1500x x1500
1500 СОФп-2ТЯ-2ТД	пластик		
1500 СОФк-2ТЯ-2ТД	керамика KS-12		
1500 СОФw-2ТЯ-2ТД	Wilsonart		
2400 СОФл-2ТЯ-4ТД	ламинат	2 тумбы с ящиками и 4 тумбы с дверкой, 8 розеток, 2 полки, 2 люминесц. светильника с выключателями	2400x x1500x x1500
2400 СОФп-2ТЯ-4ТД	пластик		
2400 СОФк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12		
2400 СОФw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart		
3000 СОФл-2ТЯ-4ТД	ламинат	2 тумбы с ящиками и 4 тумбы с дверкой, 8 розеток, 2 полки, 2 люминесц. светильника с выключателями	3000x x1500x x1500
3000 СОФп-2ТЯ-4ТД	пластик		
3000 СОФк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12		
3000 СОФw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart		



Стол-тумба островной 1500СТОФкм + стол-тумба 1500 СТкм.трпц. + стол-мойка 1500 СМОкм.трпц. + Суш-3 + локтевой смеситель


Столы островные химические (с водой) с надстольем (стеллажом)

Комбинация стола островного физического и комплекта химического стола (полипропиленовая сливная раковина, химстойкий кран для воды, слив)


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОХп	пластик	1200x1500x1500
1200 СОХк	керамика KS-12	
1200 СОХw	Wilsonart	
1200 СОХд	Durcon	
1200 СОХкм	Монолитная керамика	1500x1500x1500
1500 СОХп	пластик	
1500 СОХк	керамика KS-12	
1500 СОХw	Wilsonart	
1500 СОХд	Durcon	2400x1500x1500
1500 СОХкм	Монолитная керамика	
2400 СОХп	пластик	
2400 СОХк	керамика KS-12	
2400 СОХw	Wilsonart	2400x1500x1500
2400 СОХд	Durcon	
2400 СОХкм	Монолитная керамика	
3000 СОХп	пластик	3000x1500x1500
3000 СОХк	керамика KS-12	
3000 СОХw	Wilsonart	
3000 СОХд	Durcon	
3000 СОХкм	Монолитная керамика	

На основе опорных тумб


1500 СОХп-2ТЯ-2ТД	пластик	1500x1500x1500
1500 СОХк-2ТЯ-2ТД	керамика KS-12	
1500 СОХw-2ТЯ-2ТД	Wilsonart	
1500 СОХд-2ТЯ-2ТД	Durcon	
1500 СОХкм-2ТЯ-2ТД	Монолитная керамика	2400x1500x1500
2400 СОХп-2ТЯ-4ТД	пластик	
2400 СОХк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12	
2400 СОХw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart	
2400 СОХд-2ТЯ-4ТД	Durcon	3000x1500x1500
2400 СОХкм-2ТЯ-4ТД	Монолитная керамика	
3000 СОХп-2ТЯ-4ТД	пластик	
3000 СОХк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12	
3000 СОХw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart	3000x1500x1500
3000 СОХд-2ТЯ-4ТД	Durcon	
3000 СОХкм-2ТЯ-4ТД	Монолитная керамика	

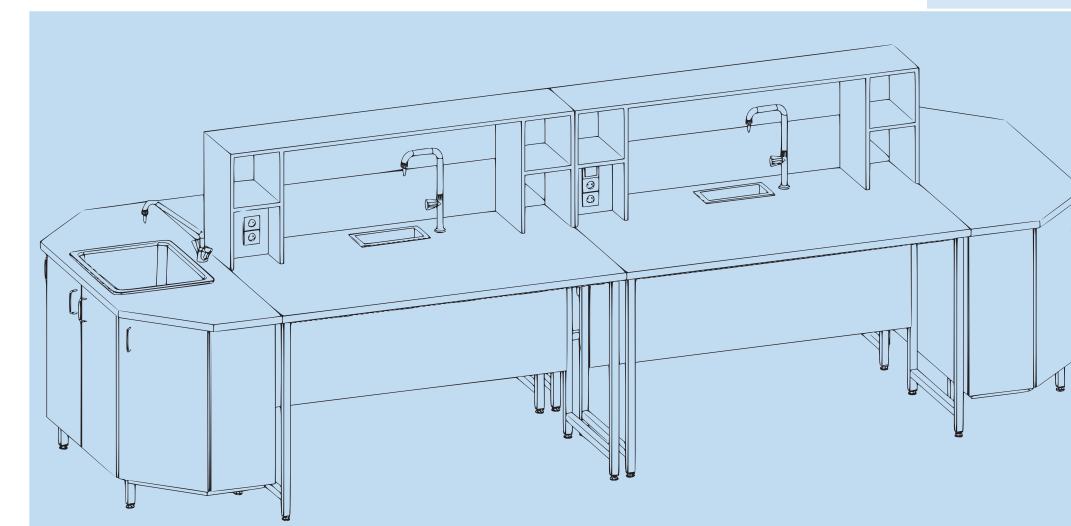


Стол островной общей длиной 4,2 м состоит из: 2 стола 1500СОХ + 1500СМОтрпц. + 1500 СТтрпц.

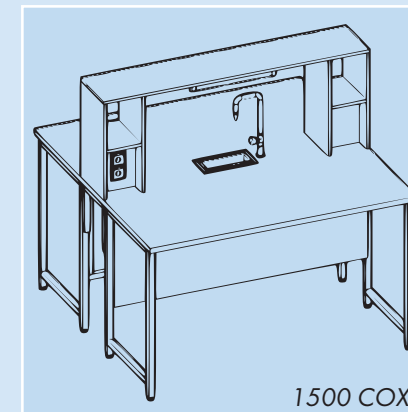


1500 СОХ

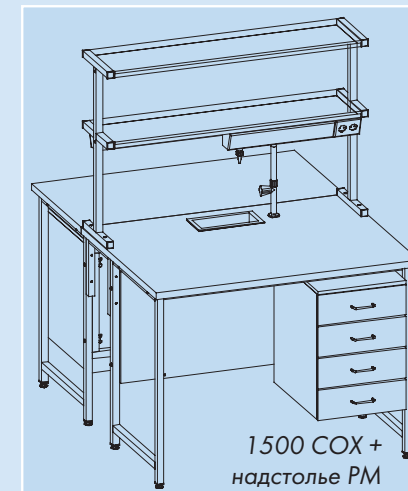


1500 СОХ +
надстолье РМ

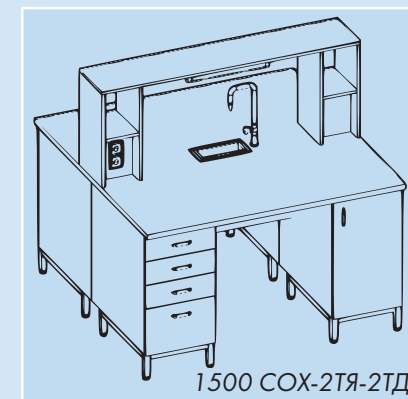


1500 СОХ-2ТЯ-2ТД

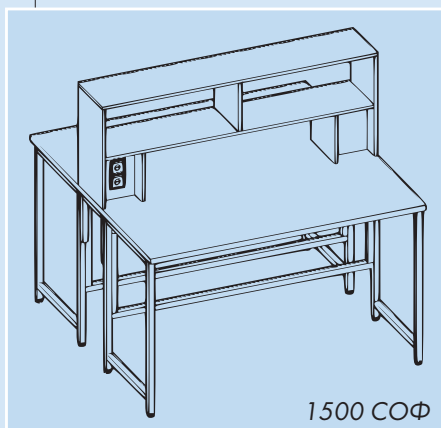

1500 СОФ

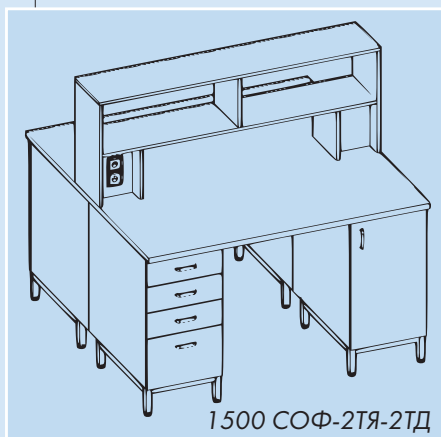

1500 СОФ-2ТЯ-2ТД

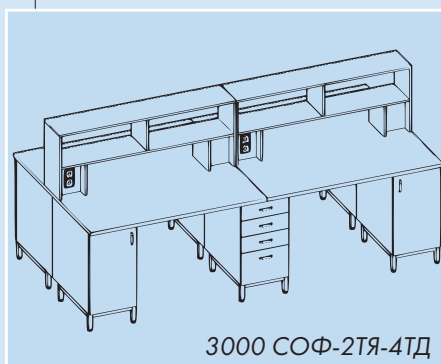

3000 СОФ-2ТЯ-4ТД




Стол островной с надстольем-стеллажом от серии РМ

Столы-мойки

Столы-мойки одинарные


Модель	Комплектация	Размеры
на тумбе с 1 дверкой		
500 СМОН.быт	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм - единый модуль из нержавеющей стали	500 х 600 х 900
500 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика	550 х 650 х 900
на тумбе с 2 дверками		
600 СМОН	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нерж. стали	600 х 600 х 900
600 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Durcon	
800 СМОН.быт	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм - единый модуль из нерж. стали, чаша слева	800х 600х 900
800 СМОН	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нерж. стали	
800 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика	
800 СМОпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	
800 СМОпп/w	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	
800 СМОпп/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм	
800 СМОН/п	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 250 (300) мм	
800 СМОН/w	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 250 (300) мм	
800 СМОкм/w	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
800 СМОкм/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
800 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Durcon	800х 600х 900
800 СМОкм	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из монолитной керамики	
на тумбе с 4 дверками		
1200СМОН.быт/п	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 140 мм, чаша слева	1200 х 600 х 900
1200 СМОН	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нерж. стали, чаша слева	
1200 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика, чаша слева	
1200 СМОпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм, чаша слева	
1200 СМОпп/w	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм, чаша слева	
1200 СМОпп/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм	
1200 СМОН/w	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 250 (300) мм	
1200 СМОкм/w	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
1200 СМОкм/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
1200 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Durcon, чаша слева	
1200 СМОкм	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из монолитной керамики, чаша слева	1500 х 600 х 900
1500СМОН.быт/п	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 140 мм	
1500 СМОН	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм по центру - единый модуль из нерж. стали	
1500 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру - единый модуль из стеклопластика	
1500 СМОпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОпп/w	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из Durcon	
1500 СМОкм	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из монолитной керамики	

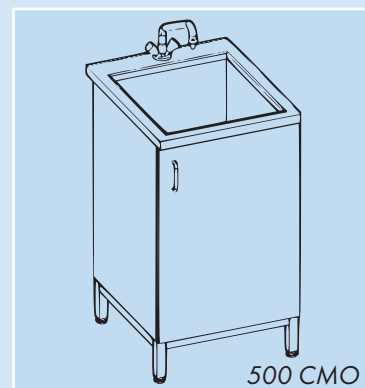

500 СМО



800 СМОсп

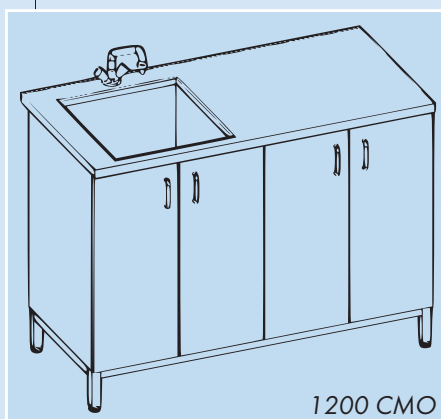


1200 СМО



1500 СМОсп

Столы-мойки трапецевидные (торцевые) к островному столу


Модель	Комплектация	Размеры
1500 СМОсп.трпц.	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру - единый модуль из стеклопластика	1500 х 600 х 900
1500 СМОпп/п.трпц	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОпп/в.трпц	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОкм/в.трпц	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм по центру	
1500 СМОкм/к.трпц	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм по центру	
1500 СМОд.трпц	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из Durcon	
1500 СМОкм.трпц	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из монолитной керамики	

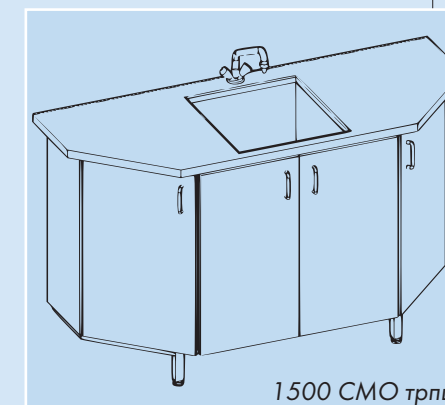

1500 СМО трпц.

Столы-мойки угловые

900 СМОУпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	900 х 900 х 900
900 СМОУпп/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	
900 СМОУн/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 250 (300) мм	
900 СМОУкм/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
900 СМОУд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Durcon	

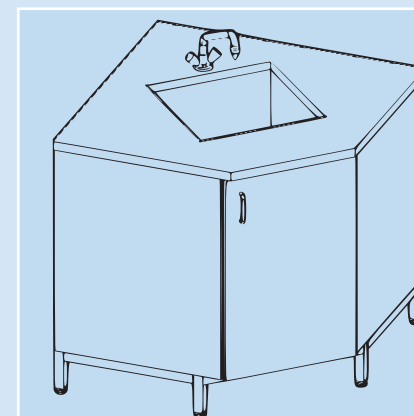

Стол-мойка одинарная угловая 900 СМОУ

Столы-мойки двойные

800 СМДн.быт	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 140 мм - единый модуль из нержавеющей стали	800 х 600 х 900
1200 СМДн/в	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из нерж. стали глуб. 250 (300) мм	1200 х 600 х 900
1200 СМДн	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нержавеющей стали	
1200 СМДсп	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика	
1200 СМДпп/п	Столешница пластик с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм	
1200 СМДпп/в	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм	1500 х 600 х 900
1200 СМДд	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм - единый модуль из Durcon	
1500 СМДн	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нержавеющей стали	
1500 СМДсп	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика	
1500 СМДпп/п	Столешница пластик с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм	1500 х 600 х 900
1500 СМДпп/в	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм	
1500 СМДд	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм - единый модуль из Durcon	


Все столы-мойки комплектуются смесителем и сливом (двойные - двумя сливами). Столы-мойки с чашами из нержавеющей стали стандартно комплектуются шаровым (рычаговым) смесителем, все остальные столы-мойки с чашами из полипропилена, стеклопластика, эпоксидного композита Durcon, монолитной керамики Monolite Ipergres - комплектуются химическистойким смесителем фирмы TOF (Италия). По заказу шаровый (рычаговый) смеситель можно заменить на химическистойкий. Двойные столы-мойки могут комплектоваться дополнительным смесителем (по заказу).

Внимание! При заказе стола-мойки с чашей глубиной 300 мм из нержавеющей стали - глубина столешницы 700 мм.


Возможны варианты комплектаций не отраженных в таблице выше. Например: у вас есть тумба стола-мойки со столешницей Wilsonart, на неё можно установить любую из врезных моек перечисленных на стр. 14-16 приводим примеры маркировок:

1200СМОН.быт/в	чаша из нержавеющей стали глубиной 140 мм
1200СМОН/в	чаша из нержавеющей стали глубиной 250 мм (300 мм под заказ)
1200СМОпп/в	чаша из ПП размером 500х400х300 без перелива
1200СМОкм/в	остальные виды чаш из ПП под заказ
1200СМОкм/в	чаша из монолитной керамики

Существуют и ограничения, например в столешницу керамика KS-12 чаши из нержавеющей стали не устанавливаются.

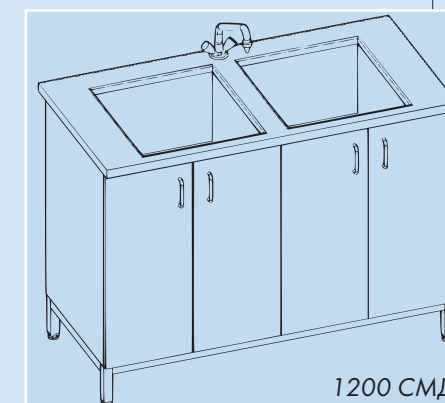

1200 СМД

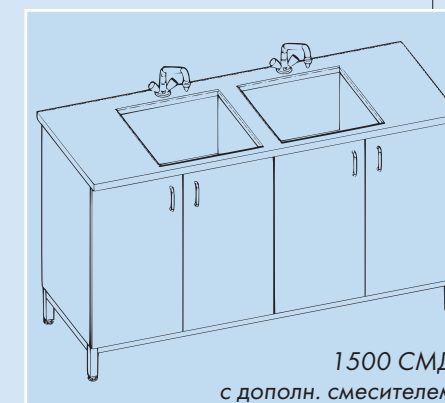

1500 СМД с дополн. смесителем

Дополнительная комплектация к столам-мойкам

■ Смесители, краны, аварийные души

Модель	Наименование, комплектация	Рычаг	Вылет	Высота
Смесители горячей/холодной воды				
Дополнительный смеситель к двойным мойкам				
Смеситель локтевой, рычаг 200-250 мм				
Смеситель со встроенным душем				
1000/275	Смеситель TOF с химстойким покрытием, взамен стандартного смесителя к мойкам из нерж.стали		250 мм	130 мм
1000/275	Дополнительный смеситель TOF с химически стойким покрытием, к двойным мойкам		250 мм	130 мм
1000/275	Смеситель TOF с химически стойким покрытием с керамическими кран-буксами, ручки-лепестки		250 мм	130 мм
1000/280	Смеситель TOF высокий с химстойким покрытием		250 мм	270 мм
1000/280	Смеситель TOF высокий с химстойким покрытием с керамическими кран-буксами, ручки-лепестки		250 мм	270 мм
1000/211	Смеситель TOF высокий с химически стойким покрытием, рычаговый		300 мм	290 мм

Краны для воды

1000/270	Кран для воды TOF в стол	150 мм	235 мм
1000/630	Кран для деминерализ., деионизир., дистиллированной воды TOF полипропиленовый в стол	150 мм	225 мм

Настольные души для глаз

1100/5	Аварийный душ для глаз TOF одинарный		
1100/7	Аварийный душ для глаз TOF одинарный, с наклоном		
1100/30	Аварийный душ для глаз TOF двойной		
1100/60	Аварийный душ для глаз TOF двойной, с наклоном		

■ Сушилки для посуды

Модель	Наименование, комплектация	Размеры	Материал
Суш-27	Сушилка для посуды 27 штырей	400 x 108 x 550	полипропилен и полистирол
Суш-27-3	Сушилка для посуды 27 штырей с креплением к островному столу и с брызгозащитным экраном		
Суш-27-4	Сушилка для посуды 27 штырей с креплением к столу-мойке и с брызгозащитным экраном		
Суш-52	Сушилка для посуды 52 штыря	550 x 122 x 700	
Суш-52-3	Сушилка для посуды 52 штыря с креплением к островному столу и с брызгозащитным экраном		
Суш-52-4	Сушилка для посуды 52 штыря с креплением к столу-мойке и с брызгозащитным экраном		
Суш-2	Сушилка для посуды 72 штыря	450 x 115 x 630	
Суш-3	Сушилка для посуды 72 штыря с креплением к островному столу и с брызгозащитным экраном		
Суш-4	Сушилка для посуды 72 штыря с креплением к столу-мойке и с брызгозащитным экраном		

■ Брызгозащитные экраны

Задние экраны


Брызгозащитный экран на мойку длиной 800 мм
Брызгозащитный экран на мойку длиной 1200 мм
Брызгозащитный экран на мойку длиной 1500 мм
Прозрачный брызгозащитный экран для остр.стола

Боковые экраны

Комплект боковых экранов на стол-мойку гл. 600 мм
Комплект боковых экранов на стол-мойку гл. 750 мм
Прозрачный боковой экран на стол-мойку гл. 600 мм
Прозрачный боковой экран на стол-мойку гл. 750 мм

Стол-тумба торцевая к островному столу, трапецевидная

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СТТм.трпц.	меламин	1500x600x900
1500 СТТп.трпц.	пластик	
1500 СТТw.трпц.	Wilsonart	
1500 СТТд.трпц.	Durcon	
1500 СТТкм.трпц.	Монолитная керамика	

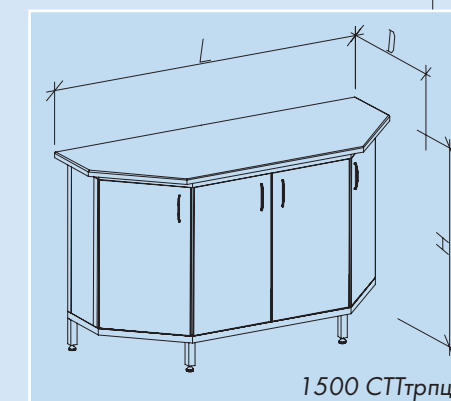

Угловые элементы к столам

■ Угловой стол-тумба к лабораторным столам внешний


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 УСТЛм	меламин	600x600x900
600 УСТЛп	пластик	

■ Угловой стол-тумба к лабораторным столам внутренний, он же к пристенным столам – внешний

900 УСТЛм	меламин	900x900x900
900 УСТЛп	пластик	

■ Угловой стол-тумба к пристенным столам внутренний


1200 УСТЛм	меламин	1200x1200x900
1200 УСТЛп	пластик	

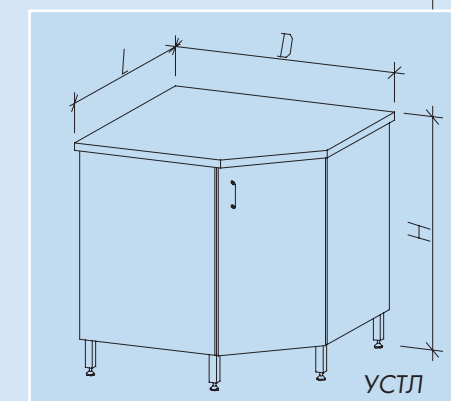

Стол для микроскопа

(со стеллажом для чашек Петри)




Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СМ	ламинат	1200x600x750(1050)
1500 СМ	ламинат	1500x600x750(1050)

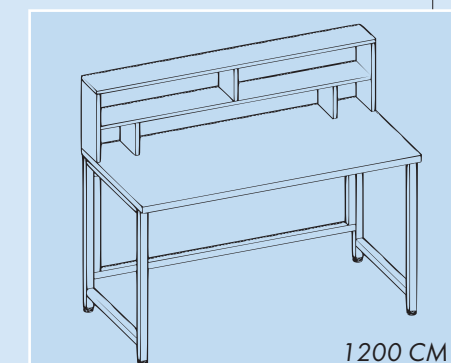

Стол-приставка

■ Столы-приставки. Стандартно высота 900 мм, по заказу – 750 мм

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 СПл	ламинат	600x600x900
600 СПп	пластик	
600 СПк	керамика KS-12	
600 СПw	Wilsonart	
900 СПл	ламинат	900x600x900
900 СПп	пластик	
900 СПк	керамика KS-12	
900 СПw	Wilsonart	

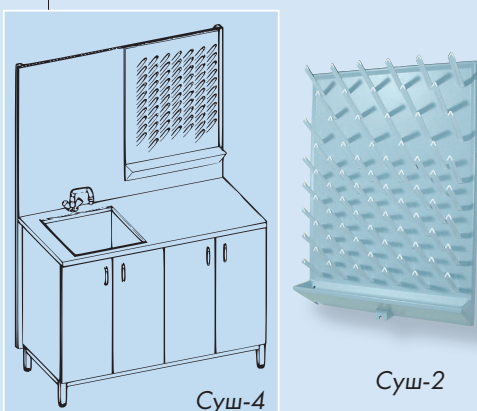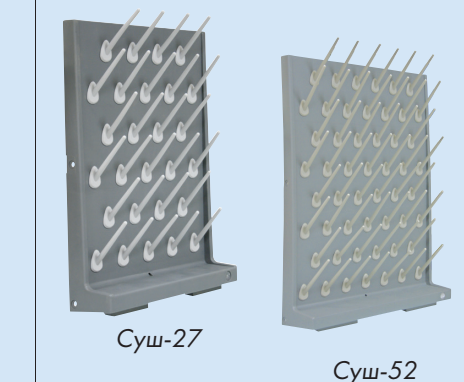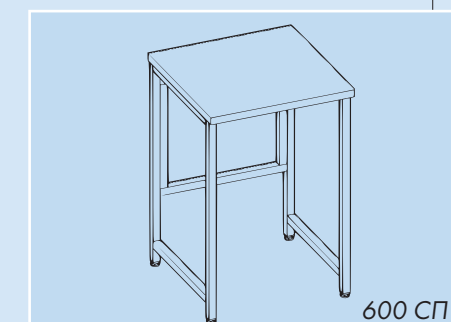




1200 СТл

Столы титровальные

Комплектация: матовый экран, 3 или 4 люминесцентных светильника (стол длиной 1200 или 1500 мм), выключатель, 2 электророзетки с заземлением. Лапки для бюреток могут быть заказаны отдельно. Обратите внимание на столы-тумбы с длинными ящиками для бюреток (1200СТПЯ и 1500СТПЯ, см. стр. 15)

Модель	Столешница	Размеры
1200 СТл	ламинат	1200х600х1700 5 стоек для бюреток
1200 СТп	пластик	
1200 СТк	керамика KS-12	
1200 СТw	Wilsonart	1500х600х1700 7 стоек для бюреток
1500 СТл	ламинат	
1200 СТп	пластик	
1500 СТк	керамика KS-12	
1500 СТw	Wilsonart	
Лапки для бюреток		по заказу

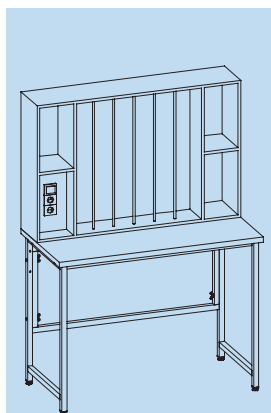

1200 СТ

Столы весовые

Столы весовые малые. Высокие или низкие

Модель	Столешница	Размеры	
900СВГ	гранит	600х400х900	для работы стоя
750СВГ	гранит	600х400х750	для работы сидя

Под заказ возможно исполнение гранитной плиты с отверстием для измерения плотности на аналитических весах (гидростатическое взвешивание).

Столы весовые большие


Комбинация стола весового малого и стола лабораторного (высоких или низких соответственно)

Высокие (для работы стоя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 СВГ-1200л	ламинат/гранит	1200х600х900
900 СВГ-1200п	пластик/гранит	
900 СВГ-1200w	Wilsonart/гранит	
900 СВГ-1500л	ламинат/гранит	1500х600х900
900 СВГ-1500п	пластик/гранит	
900 СВГ-1500w	Wilsonart/гранит	

Низкие (для работы сидя)

750 СВГ-1200л	ламинат/гранит	1200х600х750
750 СВГ-1200п	пластик/гранит	
750 СВГ-1200w	Wilsonart/гранит	
750 СВГ-1500л	ламинат/гранит	1500х600х750
750 СВГ-1500п	пластик/гранит	
750 СВГ-1500w	Wilsonart/гранит	

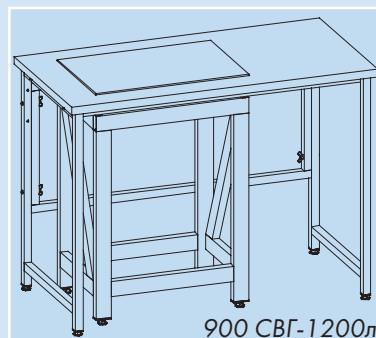


900 СВГ-1200л

Столы электрофицированные

Столы лабораторные электрофицированные

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл-эл.	ламинат	1200х600х900(1300)
1200 СЛВп-эл.	пластик	
1200 СЛВк-эл.	керамика KS-12	
1200 СЛВw-эл.	Wilsonart	

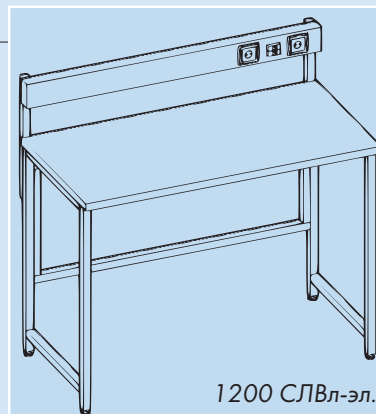

1200 СЛВл-эл.

Офисная мебель в лабораторию из белого влагостойкого меламина

Столы письменные

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПС	меламин 22 мм	1200х600х750
1500 СПС		1500х600х750
1800 СПС		1800х600х750
1200 СПл	ламинат 28 мм	1200х600х750
1500 СПл		1500х600х750
1800 СПл		1800х600х750

Столы письменные однотумбовые

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (L x D x H)
1200 СП-ТД	меламин 16 мм	тумба с дверкой	1200x600x750
1500 СП-ТД			1500x600x750
1200 СПС-ТД	1200x600x750		
1500 СПС-ТД	1500x600x750		
1200 СПл-ТД	1200x600x750		
1500 СПл-ТД	1500x600x750		
1200 СП-ТЯ	меламин 16 мм	тумба с 3 ящиками	1200x600x750
1500 СП-ТЯ			1500x600x750
1200 СПС-ТЯ	1200x600x750		
1500 СПС-ТЯ	1500x600x750		
1200 СПл-ТЯ	1200x600x750		
1500 СПл-ТЯ	1500x600x750		

Столы письменные двухтумбовые

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СП-ТЯ-ТД	меламин 16 мм	1500х600х750
1800 СП-ТЯ-ТД		1800х600х750
1500 СПС-ТЯ-ТД	меламин 22 мм	1500х600х750
1800 СПС-ТЯ-ТД		1800х600х750
1500 СПл-ТЯ-ТД	ламинат 28 мм	1500х600х750
1800 СПл-ТЯ-ТД		1800х600х750

Столы компьютерные

Стол письменный укомплектованный полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок на роликах называется компьютерным


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 СКл	ламинат 28 мм	900х600х750
1200 СКл	ламинат 28 мм	1200х600х750
1500 СКл	ламинат 28 мм	1500х600х750

Столы письменные и компьютерные угловые


Модель	Столешница	Размеры	
1500 СПУлв	меламин 22 мм	1500х900х750	левый
1500 СПУпр	меламин 22 мм	1500х900х750	правый
1500 СКУлв	меламин 22 мм	1500х900х750	левый
1500 СКУпр	меламин 22 мм	1500х900х750	правый

Столы-приставки и Тумбы со столешницей приставные с 3 ящиками к угловым столам


Модель	Столешница	Размеры
Стол-приставка к угловому столу		
600 СПлв	меламин 22 мм	левый 600х600х750
600 СПпр	меламин 22 мм	правый 600х600х750
Тумба со столешницей приставная с 3 ящиками		
400 ТПЯпр.	Тумба приставная с 3 ящиками правая	600х600х750
400 ТПЯлв.	Тумба приставная с 3 ящиками левая	600х600х750

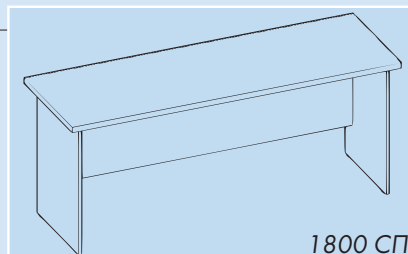


1800 СП

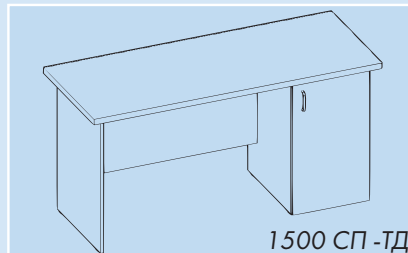


1500 СП-ТД

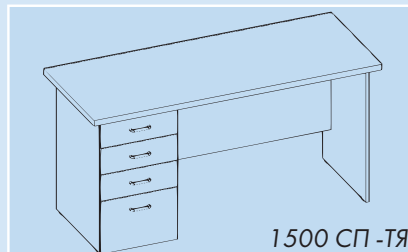


1500 СП-ТЯ

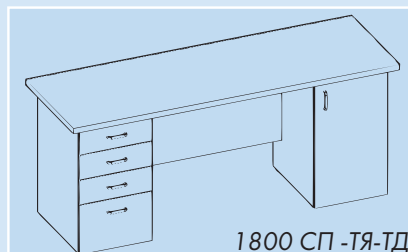

1800 СП-ТЯ-ТД

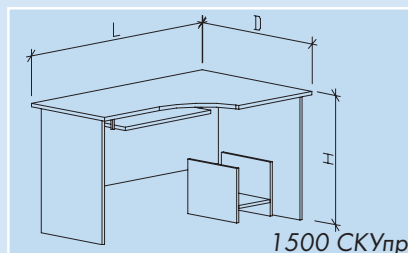

1500 СКУпр

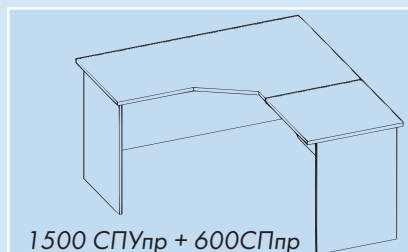

1500 СПУпр + 600 СПпр



1500 СПУпр + 400 ТПЯпр. – стол письменный угловой правый и тумба со столешницей с 3 ящиками правая

Тумбы подкатные и подставные


Тумбы подкатные

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн	низкая с дверкой	400x530x650
400 ТЯн-2	низкая с 2 ящиками	
400 ТЯн-3	низкая с 3 ящиками	
400 ТЯн-4	низкая с 4 ящиками	


400 ТДн



400 ТЯв-5

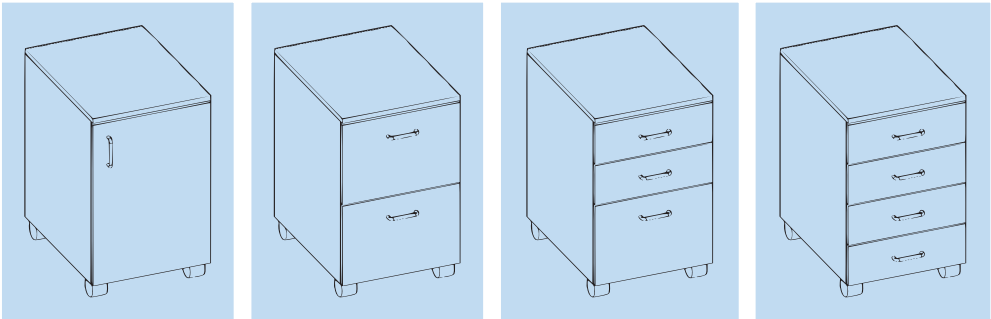

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДв	высокая с дверкой	400x530x800
400 ТЯв-2	высокая с 2 ящиками	
400 ТЯв-3	высокая с 3 ящиками	
400 ТЯв-4	высокая с 4 ящиками	
400 ТЯв-5	высокая с 5 ящиками	

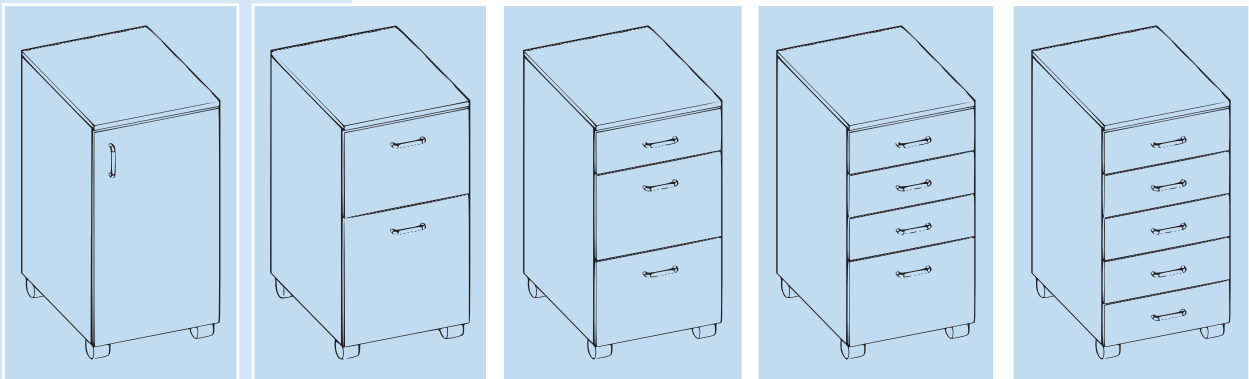


Возможно исполнение с правой и левой дверкой.
Стандартно петли справа, уточняйте при заказе.

Обратите внимание!

Тумбы подкатные высокие не могут быть использованы со столами с высотой столешницы 750 мм (для работы сидя).

Тумбы подставные (со столешницей)

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (LxHxD)
500 ТС	ламинат	с дверкой и 2 съёмными полками	500x600x900
500 ТСп	пластик		
500 ТСк	керамика KS-12		
500 ТСw	Wilsonart		
500 ТСЯ	ламинат	с 4 выдвижными ящиками	
500 ТСЯп	пластик		
500 ТСЯк	керамика KS-12		
500 ТСЯw	Wilsonart		

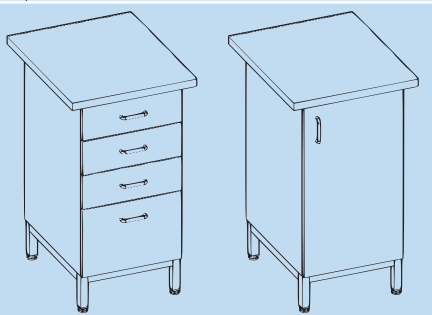

500 ТСЯ


500 ТС

Столы-тумбы подкатные


Предназначены для заполнения всего объема под столешницей, при сохранении возможностей доступа к коммуникациям (водоснабжение, канализация, электроснабжение). Передние ролики имеют стопор. Содержат отделение со съемной полкой закрывающееся распашными дверцами и отделение с 4 выдвижными ящиками.

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
900 СТП	2-ств. тумба с полкой	700-800x530x800	для стола 900 мм
1200 СТП	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТП	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x800	для стола 1500 мм
1800 СТП	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x800	для стола 1800 мм
1200 СТПЯ	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТПЯ	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1300x530x800	для стола 1500 мм

Столами-тумбами 1200СТПЯ и 1500СТПЯ рекомендуем укомплектовывать столы титровальные.

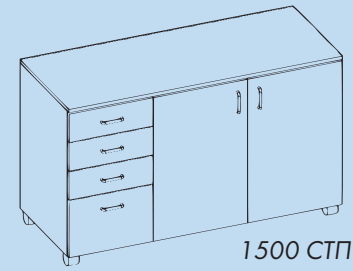

1500 СТП

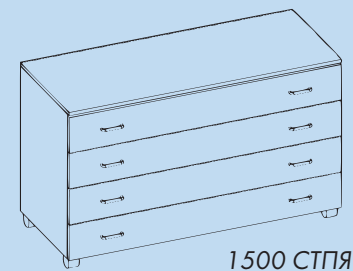

1500 СТПЯ

Дополнительная комплектация к подкатным и подвесным тумбам, столам-тумбам и к шкафам

Центральный замок на выдвижные ящики для серий МК и МК-Элит
Система защиты от опрокидывания подкатных тумб
Замок на дверку (ящик) из меламина для серий МК
Замок на распашные двери из меламина для серии МК
Шарикоподшипниковые направляющие на выдвижной ящик серии МК
Амортизатор для шарикоподшипниковых направляющих
Комплект направляющих на выдвижной ящик фирмы BLUM/Hafele с царгами, амортизаторами и доводчиками
Разделители в выдвижные ящики
Лотки в выдвижные ящики
Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алю.рамах на шкаф 400
Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алю.рамах на шкаф 800
Замена стеклянной двери на тонированную стеклянную дверь



Шкафы для хранения



400 ШРВ



800 ШП



400 ШРЯ

Модель	Назначение	Комплектация	Размеры (L x D x H)
800 ШД	для документов	полки и ниж. дверцы – меламин, верх стекло	800x380x1930
800 ШД-т	для документов	то же, но стекло тонированное	
800 ШВт	шкаф-витрина	полки-стекло, 4 стекл. дверцы	
800 ШВт.ст.	шкаф-витрина	4 дверцы, полки и задн. стенка – стекло	800x580x1930
800 ШР	для реактивов	2 дверцы – меламин, фланец	
400 ШРЯ		дверца и 4 выдв. ящика, фланец	
400 ШРВ		5 выдв. корзин, фланец	
800 ШП	для посуды	полки и ниж. дверцы – меламин, верх стекло	800x580x1930
800 ШПст	для посуды	все дверцы – стекло	
800 ШП-т	для посуды	верх. дверцы – тонир. стекло, низ меламин	
800 ШПст-т	для посуды	все дверцы – тонир. стекло	
800 ШО	для одежды	2 дверцы – меламин	800x380x350
800 ШПр	для приборов	4 дверцы – меламин	
800 АНТ		Антресоль для 800ШД (гл. 380 мм)	
800 АНТгл		Антресоль для 800ШПр (гл. 580 мм)	800x580x350

Стеллажи


800 с-ж	стеллаж	800x360x1900
800 с-ж-н	стеллаж низкий	800x360x1200

Навесные шкафы и стеллажи


1200 НШ	навесной шкаф	1200x310x740
1500 НШ	навесной шкаф	1500x310x740
1200 НС	навесной стеллаж	1200x290x270
1500 НС	навесной стеллаж	1500x290x270




1500 НШ

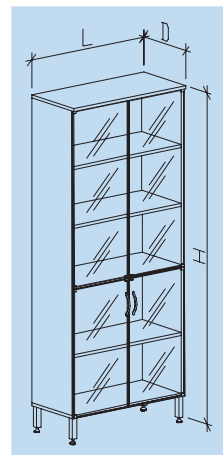

800 ШДст

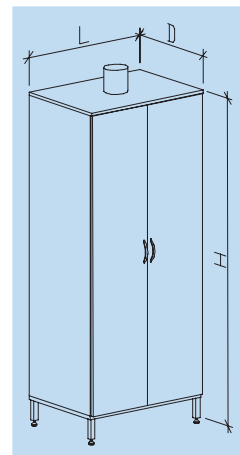

800 ШР

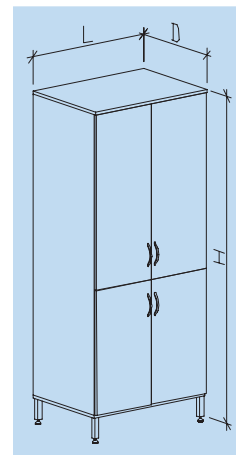


800 ШПр


Серия МК (металло-каркасная)

Материалы и фурнитура


Столешницы

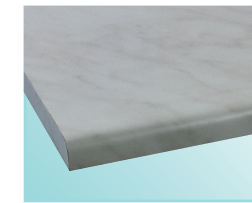


ламинат 28 мм

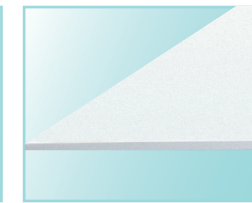


меламин 22 мм

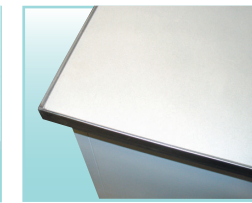


керамика KS-12 с бортиком

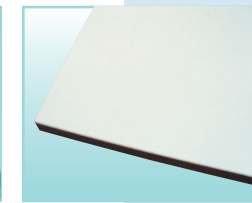


пластик 16 мм

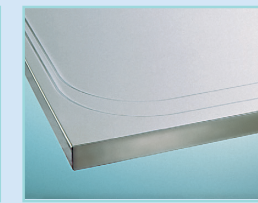

нерж. сталь без бортика / с бортиком

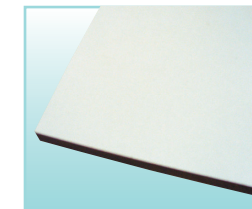


химстойкий пластик 16 мм Wilsonart

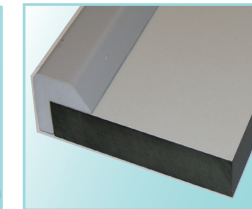


химстойкий пластик 16 мм Wilsonart с бортиком



эпоксикомпозит 19 мм Durcon/Epochstone без бортика / с бортиком

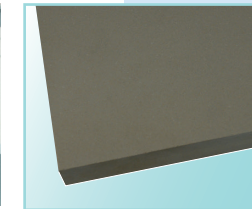

монолитный керамогранит 20 мм

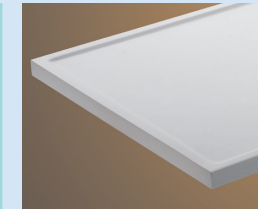

монолитная керамика 20/28 мм без бортика / с бортиком

Каркасы

Изготавливаются из стальной профильной трубы 30x30x1,2 мм.

Нерабочие поверхности

Корпуса тумб, столов-тумб и шкафов изготовлены из влагостойкого белого меламин производства фирмы "PUHOS" (Финляндия), который характеризуется, повышенной влагонепроницаемостью, вязкой структурой, высоким качеством и долговечностью. Влагостойкость придает пропитка всего массива плиты парафиновыми смолами. Внешне влагостойкий меламин отличается сине-зеленым цветом на открытом срезе.

Открытые срезы меламиновых плит обработаны кромкой PVC или ABS (REHAU, Германия) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Данная обработка придает изделиям улучшенные потребительские свойства по сравнению с обработкой меламиновой кромкой на клеевой основе.

Ручки для дверей и выдвижных ящиков

Изготовлены из полипропилена стойкого к воздействию кислот и щелочей, органических растворителей, дезактивирующий и дезинфицирующих растворов. Имеют логотип компании ЛаМО.

Сливные раковины



полипропилен



нерж.сталь



эпоксикомпозит



монолитная керамика

Глубокие мойки



полипропилен глуб. 230 и 300 мм



нерж.сталь глуб. 140, 250 и 300 мм



стеклопластик глуб. 300 мм



эпоксикомпозит глуб. 280 мм



монолитная керамика глуб. 260-280 мм

Краны, смесители для воды и краны для газов, вакуума, сж. воздуха фирмы TOF (Италия)

Серия МК (металло-каркасная)